



IWAKI


天面フィルム式フラスコ +ラック

# EZ-Open Top FLASK™

春のキャンペーン

専用ラックがついて  
お買い得!!

2010年新発売製品・天面フィルム式  
フラスコ「EZ-Open Top FLASK™ 150cm<sup>2</sup>」  
2ケースに専用ラックが添付されているお買い得  
キャンペーンです。  
3段ラック、または5段ラックをお選び頂けます。  
キャンペーン専用コードでご注文下さい。

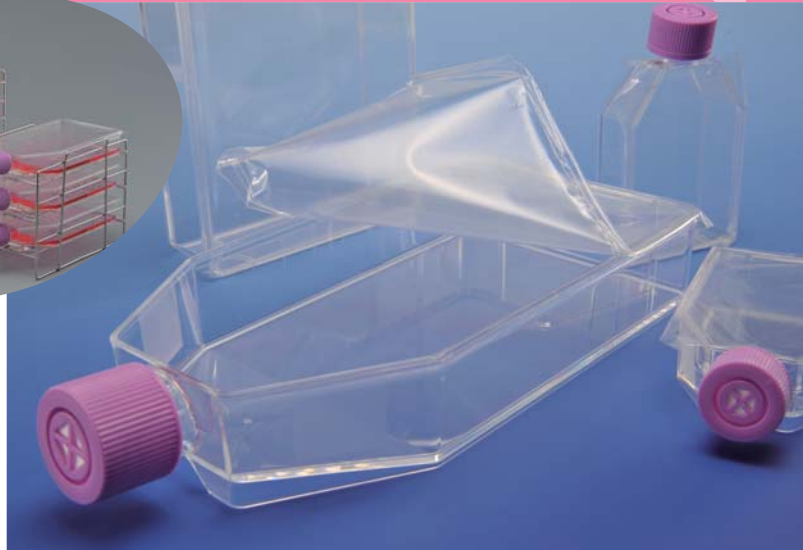

## EZ-Open Top FLASK™

- ◎フラスコ天面がフィルムになっており、取り外し可能です。
- ◎フラスコの持ち運びやすさと、ディッシュの細胞回収作業のスムーズさの両方を兼ね備えています。

### ■各培養容器に対する利便性の比較

培養容器	安全性	細胞回収の作業性
フラスコ 	密閉型で 液漏れの心配がなく 扱いやすい	挿入口が狭く、 回収作業が不便
ディッシュ 	開放型のため 液漏れの心配があり 扱いにくい	回収作業に 不便さはなく、 細胞回収率も高い
EZ-Open Top FLASK™ 	密閉型で 液漏れの心配がなく 扱いやすい	天面がフィルム式のため、 取り外すことにより 回収作業が容易



### お客様の声

- 接着の強い細胞の回収率がUPした。
- 細胞シートの回収に使いやすかった。
- 細胞回収の時間が短縮できた。

### ■キャンペーン対象製品

キャンペーン 品種コード	セット内容	フラスコ数 (個/2箱)	キャンペーン 価格(円)
3183-150-RACK3	EZ-Open Top FLASK™ 150cm <sup>2</sup> (品種コード3183-150) 2ケース + 3段ラック1個	40	48,000
3183-150-RACK5	EZ-Open Top FLASK™ 150cm <sup>2</sup> (品種コード3183-150) 2ケース + 5段ラック1個	40	48,000

■通常製品 ※下記の品種コードでご注文頂いた場合は、ラックは添付されません。ご注意ください。

品種コード	培養面積	首部形状、容量(mL)	内袋入数(個/パック)	箱入数(個/箱)	標準価格(円)
3173-025	25cm <sup>2</sup>	カントネック、70mL	10	20	12,000
3183-150	150cm <sup>2</sup>	カントネック、600mL	2	20	24,000

キャンペーン期間

2011年4月1日～2011年6月30日 (弊社受注分まで)

AGC 旭硝子株式会社

## ■フィルムの特長

- 厳しい品質条件をクリアした最適なフィルム素材(PET/PE/イージーピールシーラント)を採用しています。
- フィルム接着部は接着剤を使用しない熱溶着処理を採用。細胞毒性の心配がなく安心してご使用頂けます。
- フィルム接着部からの液漏れ防止を目的とした厳しいリークテストを実施しています。
- 最適なフィルム剥離強度を実現。剥離用のタブを設け、スムーズなフィルム剥離が可能です。

## ■使用手順

### 1 細胞培養



密閉性培養容器として使用

### 2 天面フィルム剥離



細胞培養後に天面フィルムをはがし開口部を広く開放

### 3 細胞回収



接着性細胞やシート状細胞の回収がスムーズ

## ■推奨使用例

### 各種接着性細胞培養

- 繊維芽細胞 ● 神経芽細胞 ● マクロファージ ● 筋芽細胞 ● 樹状細胞 ● 間葉系細胞 ● 腫瘍細胞 ● 口腔粘膜細胞

### 細胞シート工学

- 表皮細胞シート ● 角膜上皮細胞シート ● 心筋シート ● 血管内皮細胞シート

各種ECMコート品も取り扱っております。弊社営業までお問い合わせ下さい。

- コラーゲンType I・III・IV ● ビトロネクチン ● ポリエチレンイミン
- PLL・PDL ● ラミニン ● EHSマトリックス
- ファイブロネクチン ● ゼラチン ● 低接着表面

## 【注意事項】

- 剥離作業の時に力を入れすぎますと、フィルムが切れたり、内容物がこぼれたりするおそれがあります。慎重に剥離して下さい。
- 培養中に培地等が漏れないように、しっかりと天面フィルムを貼り付けていますので、剥離する際、貼り付け部分にフィルムが残ってしまうことがあります。予めご了承下さい。
- 天面にフィルムを貼り付けている設計上、安定したスタッキング(積み重ね)はできません。積み重ねてご使用される場合は、天面フィルムを痛める可能性がありますので、お取り扱いに十分ご注意下さい。

EZ-Open Top FLASK™はAGCテクノグラス株式会社の商標です。

- 本リーフレットに記載されている標準価格は、平成23年3月1日現在のメーカー希望小売価格を示します。消費税は含まれておりません。価格及び製品仕様に関しては、予告なく変更する場合がございます。
- 本リーフレットに記載の標準価格・キャンペーン価格などの表現は代理店・販売店の自由な価格設定を拘束・指示するものではありません。実際の納入価格に関しましては、代理店・販売店へお見積をご依頼下さい。

## AGC 旭硝子株式会社 AGC電子カンパニー

エレクトロニクス事業本部  
 コンシューマ事業部 サイテック部

〒273-0044 千葉県船橋市行田1-50-1 (AGCテクノグラス株式会社内)  
 TEL 047(421)2211 FAX 047(421)2009  
 大阪 TEL 06(6373)5815 名古屋 TEL 052(211)3855 福岡 TEL 092(451)5606  
 技術問い合わせ TEL 047(421)2181

## AGC AGCテクノグラス株式会社

〒273-0044 千葉県船橋市行田1-50-1  
<http://www.atgc.co.jp/div/rika/>

## ■販売店